

THÔNG SỐ TRỊ LIỆU

Độ rộng xung	Năng lượng
1064nm (5-10ns)	1.3J
532nm (5-10ns)	0.5J
FR (<300µs)	3J
RTP 1064 (<20ns)	2J
RTP 532 (<20ns)	0.6J
Tia dẫn đường	Laser Diode.635nm/1mW
Spot Size (ứng với các đầu trị liệu)	
Fractional 1064	5 x 5mm ²
Fractional 532	4 x 4mm ²
Đầu chuẩn trực	8mm
Zoom	1 ~7mm

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- **Nâng cấp Hệ thống điều khiển**
- **Năng lượng, Vật tư tiêu hao tối ưu**
- **Cải tiến Tuổi thọ, hệ thống làm mát**
- **Công nghệ DOE thấu kính độc quyền LaserOptek**
- **Bóng đèn lên đến 20 triệu xung**
- **Độ suy hao <1%**
- **Độ rộng xung 4ns, đạt chuẩn tiêu chuẩn vàng**



Hà Nội. Tầng 9, số 381 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội Tel. 0243 2222 528 - 0243 2222 529
Chi nhánh TPHCM. Số 16 Hoa Phương, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Tel. 028 38688 374
Hotline. 1900 636 183 / Web. www.thietbithammyhatech.vn



Phiên bản giới hạn độc quyền
từ Laseroptek tại Việt Nam

HELIOS PRO LIMITED

BẬT KHA CHIẾN BẠI MỌI SẮC TỐ

Bóng đèn lên đến
20 triệu xung

Nâng cấp
Hệ mới

Phiên bản giới hạn
dành riêng cho
thị trường Việt Nam



HELIOS PRO LIMITED

Fractional Q-switched Nd:Yag Laser (1064nm/532nm)

HELIOS PRO TIÊU CHUẨN MỚI TRONG TRỊ LIỆU THẨM MỸ - BỆNH LÝ SẮC TỐ

Thiết bị có độ bền cao không vật tư tiêu hao, chi phí thấp
 Vận hành ổn định trong thời gian dài
 Đạt đủ các chứng chỉ quốc tế: KFDA, CE, FDA K152856



4 lựa chọn cho đầu trị liệu



Zoom



[Option]
Collimator



[Option]
Fractional 1064



[Option]
Fractional 532


5 chế độ
 1064nm
 532nm
 FR
 RTP 1064nm
 RTP 532nm

FR mode
 Non-Q (Free running)
 RTP mode
 Công nghệ Xung kép
 cung cấp năng lượng
 đồng nhất
 Auto spot size

4 lựa chọn
 Fractional 532
 Fractional 1064
 Collimator
 Zoom




Công nghệ Toning 4G Helios Pro

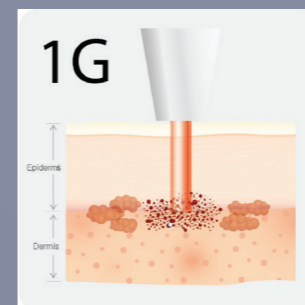


▶ 1G: Chế độ
G-Black Toning

Điều trị các sắc tố da nằm giữa biểu bì và hạ bì sử dụng phương pháp laser toning

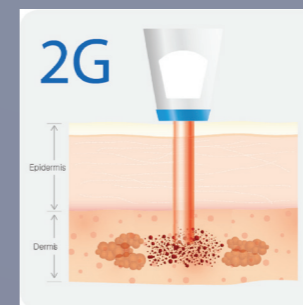


▶ 2G: Chế độ
G-Blue Toning

G-Blue điều trị các sắc tố nằm giữa lớp biểu bì và hạ bì nhưng sâu hơn so với chế độ Black Toning

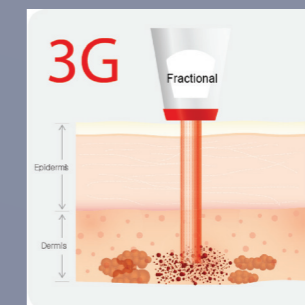

▶ 3G: Chế độ
Red -Toning


Hiệu quả trong việc điều trị các sắc tố ở tầng hạ bì thông qua chế độ Fractional 1064nm – “một sáng chế độc quyền của Helios Pro”, giảm thiểu tối đa cảm giác đau khi trị liệu.

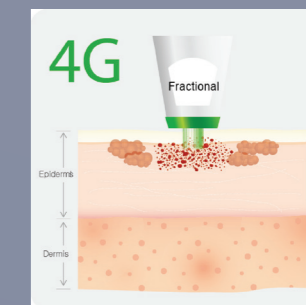

▶ 4G: Chế độ
G-Green Toning

Điều trị các sắc tố nằm ở lớp biểu bì, sử dụng chế độ Fractional 532nm, ít tác dụng phụ, nâng cao hiệu quả trị liệu.

Tính ổn định cao của đầu ra năng lượng

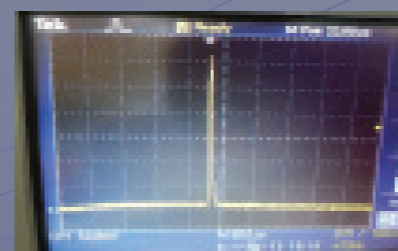

Single pulse



Twin pulse (Real Twin Pulse)

